

Căutare în funcție de numele de familie sau de numărul de identificare a pacientului

Adăugare pacient nouExportă toate datele

NUMELE PACIENTULUI	Data nașterii	Numărul de identificare a pacientului	Ultima încărcare	Distribuire dată
PACIENT 1	17 Jan 1986		26 Oct 2021	✓ Pornit
PACIENT 2	5 May 1990			✗ Invitat
PACIENT 3	1 Jan 2020			✗ Invitat
PACIENT 4	20 Jan 1974		11 Oct 2021	✗ Oprit

Încărcare date

Salvare sau imprimare raport

Mergi la rapoarte interactive

Ștergere

Editare

Exportare

Distribuire date

Cont Clarity pentru pacienți



Pacienții pot accesa Clarity online la **clarity.dexcom.eu** sau pot descărca aplicația din magazinul de aplicații. Pentru a se conecta, pacienții pot folosi aceleași date de cont ca pentru aplicația Dexcom ONE.

Pasul 1 - Transmiteți pacientului codul de distribuire

Transmiteți-i pacientului codul unic de distribuire, prin e-mail sau versiunea imprimată cu ocazia consultării. Datele nu se distribuie între clinică și pacient înainte ca invitația de distribuire Dexcom Clarity să fie acceptată.

Codul dvs. de distribuire*


QTPH-LWTN-PXKP

Introduceți acest cod la <https://clarity.dexcom.eu/share>

* Expiră: 2 Ianuarie 2022

Pasul 2 – Cereți pacientului să autorizeze vizualizarea de către clinică a datelor

Autorizare cu ajutorul aplicației Dexcom Clarity. Apăsați pe Profil > Autorizare și urmăriți instrucțiunile.

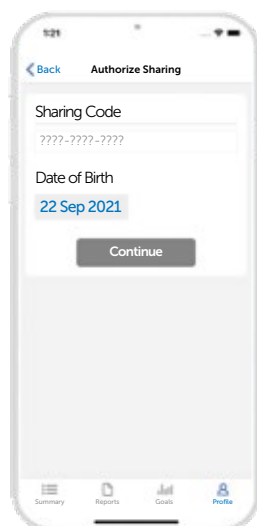

Autorizare cu ajutorul website-ului Dexcom Clarity

Conectați-vă online la Dexcom CLARITY, la **clarity.dexcom.eu/share**. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Introduceți codul de distribuire furnizat de clinica dvs.

Verificați-vă data nașterii

DD

Month

YYYY

Continuare

Anulare

Utilizare vizată/Declarație privind siguranța.

Software-ul web Dexcom CLARITY este destinat atât utilizatorilor casnici, cât și profesioniștilor din domeniul medical pentru oferirea de asistență persoanelor care suferă de diabet, în cadrul revizuirii, analizei și evaluării datelor anterioare ale monitorizării continue a nivelurilor glucozei, pentru susținerea unui management eficient al diabetului. Vizează utilizarea ca accesoriu al dispozitivelor Dexcom de monitorizare continuă a nivelurilor glucozei, cu capacități de interfață de date. Atenție: Software-ul nu oferă niciun fel de recomandare medicală nu trebuie utilizat în acest scop. Utilizatorii casnici trebuie să consulte cu un profesionist medical înainte de a face orice interpretări de natură medicală și înainte de a-și ajusta terapia pe baza informațiilor din software. Atenție: Profesioniștii medicali trebuie să folosească informațiile oferite de software împreună cu alte informații clinice aflate la dispoziția lor.

Dexcom, Dexcom ONE și Dexcom CLARITY sunt mărci comerciale înregistrate ale Dexcom, Inc. în SUA și pot fi înregistrate în alte țări.

Dexcom ONE este un dispozitiv medical – CE 2797

Pentru informații importante privind siguranța și instrucțiuni de utilizare, vizitați [Dexcom.com](https://dexcom.com) sau consultați un medic, dacă este nevoie.

© 2021 Dexcom Toate drepturile rezervate - LBL-1002502 Rev001