

Urmăriți valorile glucozei cu



Dexcom CLARITY este o parte importantă a sistemului de monitorizare continuă a glucozei (CGM), oferind o perspectivă holistică a managementului diabetului dvs. prin evidențierea tiparelor/modelelor, tendințelor și statisticilor de glucoză. În timp ce utilizați aplicația Dexcom CGM, se trimit automat și continuu datele dvs. despre valorile glucozei în contul dvs. Dexcom CLARITY.

Cu aplicația Dexcom CLARITY, consultați valorile cheie, creați rapoarte, autorizați transmiterea informațiilor glicemice cu medicul curant/clinica și alegeți opțiunea de a primi notificări săptămânale ale progresului dvs.

Media Glucozei

Media tuturor valorilor glucozei înregistrate de CGM din intervalul de timp selectat. Cunoașterea valorii glucozei medii vă oferă un punct bun pentru a începe atunci când încercați să mențineți valoarea glucozei în Intervalul Tintă.

Deviația Standard

Reflectă cât de mult cresc și scad valorile glucozei înregistrate de CGM cunoscute și sub denumirea de variabilitate glicemică.

GMI (Glucose Management Indicator)


Dexcom CLARITY determină valoarea estimată HbA1C ca fiind valoarea medie a glucozei, pornind de la un număr minim de zile cu o durată minimă de timp de utilizare a CGM.

Time in Range (Timp în Intervalul Tintă)


Procentul de timp în care nivelul glucozei este scăzut, în Intervalul Tintă sau un nivel al glucozei crescut. Intervalul Tintă Dexcom CLARITY este de 70-180 mg/dL, acesta nu poate să fie schimbat.

Tipare/Modele

Evenimente consecvente ale nivelului glucozei ridicate sau crescute, în aceeași perioadă de timp al zilei, în mai multe zile.

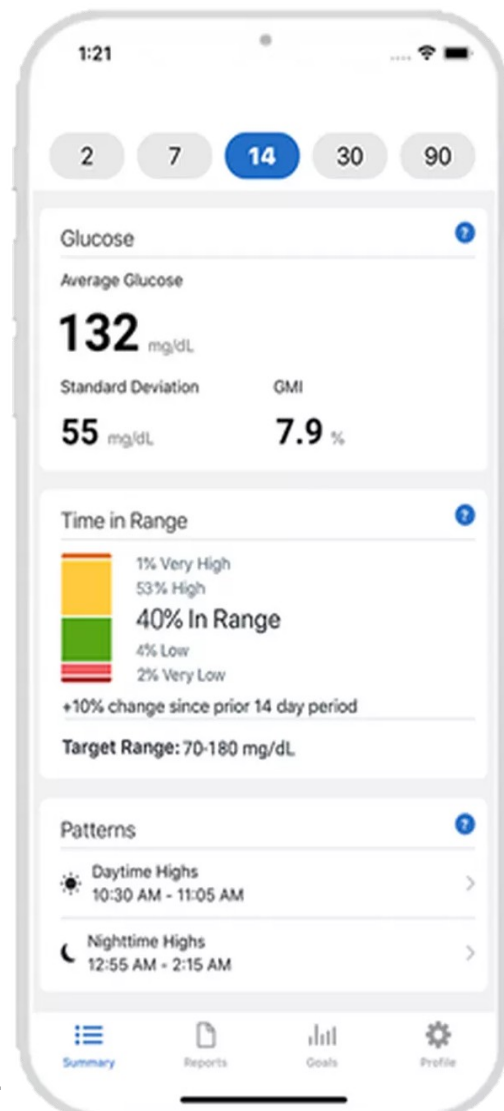

Utilizați Dexcom CLARITY online la **classy.dexcom.eu** pentru a vizualiza rapoarte detaliate și interactive. Acest raport **Trenduri** combină toate valorile glucozei din intervalul de date selectat pentru a evidenția o zi obișnuită.

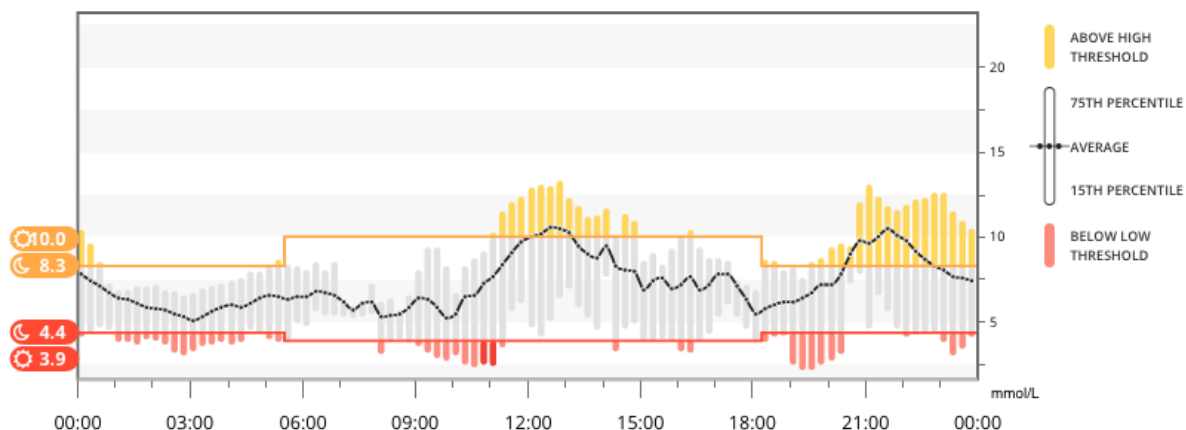

Pentru mai multe informații despre rapoartele Dexcom CLARITY, vizitați clarity.dexcom.eu/glossary *în timp ce sunteți conectat la internet cu acordul de a partaja date

Partajarea datelor glicemice cu medicul

Puteți autoriza schimbul de date cu medicul dvs./clinica, astfel încât acesta să aibă acces la datele dvs. în timpul consultațiilor sau oricând aveți nevoie de asistență. Clinica dvs. vă va oferi Codul de partajare. Pentru a începe partajarea datelor glicemice, utilizați una dintre următoarele variante de partajare:

Partajează folosind aplicația Dexcom CLARITY

- 1 Conectați-vă la aplicația Dexcom CLARITY cu contul dvs. Dexcom.
- 2 Atingeți **Profil** > **Autorizați** și urmați instrucțiunile.

Partajează folosind website-ul Dexcom CLARITY

- 1 Conectați-vă la Dexcom CLARITY online la clarity.dexcom.eu/share
- 2 Urmăți instrucțiunile de pe ecran.

Partajati Datele cu o Clinica

Medicul/Clinica dvs. va va oferi un cod de partajare, astfel incat sa primeasca in mod continuu la datele dvs. glicemice si sa poata sa faca mai usor programari. Daca clinica dvs. nu v-a transmis o invitatie de partajare, puteti solicita medicului/clinicii sa va creeze o invitatie de partajare. Puteti opri partajarea cu medicul/clinica in orice moment.

Introduceti codul de partajare pe care l-ati primit de la medic/clinica

Verificati data nasterii


Zi

Luna

An

Continua

Anulez

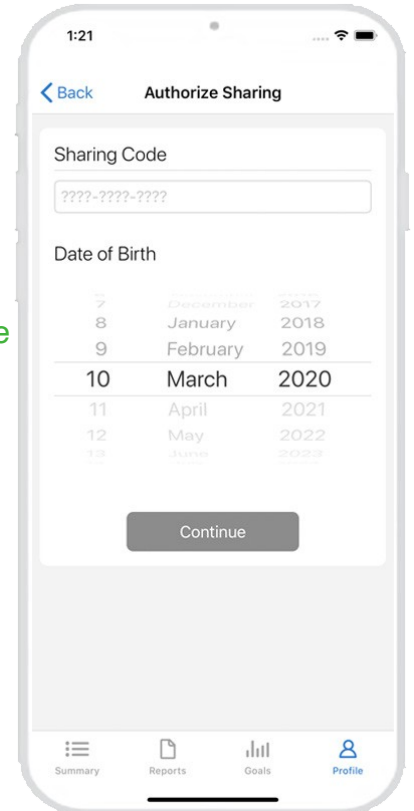

Încărcați datele receiverului pt. a vă pregăti vizita

Dacă utilizați CGM-ul doar cu receiverul Dexcom, vă puteți pregăti pentru vizitele la clinică încărcând datele dvs. CGM în contul dvs. Dexcom CLARITY în avans.* Odată ce autorizați partajarea, pentru fiecare încărcare, clinica dumneavoastră va avea, de asemenea, acces la acele date. Receiverul conține date pentru aproximativ 30 de zile, așa că se recomandă încărcarea o dată pe lună pentru a vă salva toate datele.

- 1 Utilizatorii care folosesc pentru prima dată Dexcom CLARITY trebuie să creeze un cont la clarity.dexcom.eu
- 2 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul Dexcom CLARITY Uploader.
- 3 Conectați-vă receiverul la computer pentru a încărca datele automat.

Pentru următoarele încărcări, trebuie doar să conectați receiverul la computer.



*Este necesară o conexiune la internet în timpul încărcării în Dexcom CLARITY.

Cerințe minime: dexcom.com/clarity-requirements | Dexcom CLARITY nu este încă disponibil pentru toate țările. Pentru întrebări despre Dexcom CLARITY, contactați reprezentantul local Dexcom.

Utilizare prevăzută/Declarație de siguranță

Software-ul Dexcom CLARITY bazat pe web este destinat utilizării atât de către utilizatorii casnici, cât și de către profesioniștii din domeniul sănătății pentru a ajuta persoanele cu diabet zaharat în revizuirea, analiza și evaluarea datelor CGM pentru a sprijini gestionarea eficientă a diabetului. Este destinat utilizării ca accesoriu pentru dispozitivele Dexcom CGM cu capabilități de interfață de date. Atenție: Software-ul nu oferă niciun sfat medical și nu trebuie utilizat în acest scop. Utilizatorii casnici trebuie să consulte un profesionist din domeniul sănătății înainte de a face orice interpretare medicală și ajustări de terapie din informațiile din software.

Atenție: Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să utilizeze informațiile din software împreună cu alte informații clinice disponibile.

©2017-2020 Dexcom și Dexcom CLARITY sunt mărci comerciale înregistrate ale Dexcom, Inc. în Statele Unite și pot fi în alte țări.

LBL014340 Rev 004